

Energiesparmodus beim Fußscanner bitte deaktivieren!

Nach der Treiberinstallation (Treiber erhältlich auf unserer Homepage unter <https://pedcad.info/doku.php?id=pedoffice:instalation:treiber>

Please deactivate power-saving mode on the foot scanner!

After installing the driver (available on our website at <https://pedcad.info/doku.php?id=en:pedoffice:instalation:treiber>

bitte unbedingt den Energiesparmodus des Gerätes deaktivieren, da er sonst nach der ersten Benutzung in den Stand-By-Modus gehen wird.

Zum Vorgehen der Deaktivierung des Energiesparmodus finden Sie nachfolgend die Anleitung mit Screenshots:


please make sure to deactivate the device's power-saving mode, otherwise it will switch to standby mode after the first use.

Below you will find the instructions with screenshots explaining how to deactivate the power-saving mode:

1.

Nach der Treiberinstallation haben Sie unten in der Windows-Taskeiste ein kleines blaues, rechteckiges Symbol. Sollte dieses nicht ersichtlich sein, dann klicken Sie bitte auf den Pfeil nach oben, damit Systray aufgeklappt wird, wo Sie das Symbol sehen.


After installing the driver, you will see a small blue rectangular icon in the Windows taskbar at the bottom of the screen. If it is not visible, please click the **up arrow** to open the system tray, where the icon should appear.

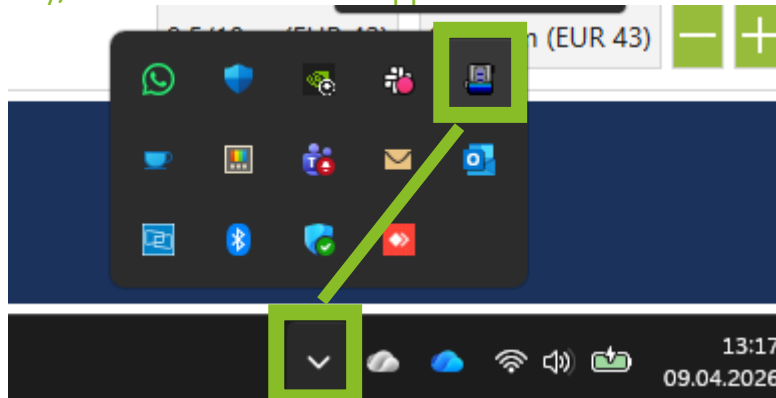

2.

Klicken Sie über das rechte blaue Symbol mit der **RECHTEN** Maustaste und wählen in den Kontextmenü > **Scanner Utility...**

Right-click on the blue icon and select **Scanner Utility...** from the context menu.

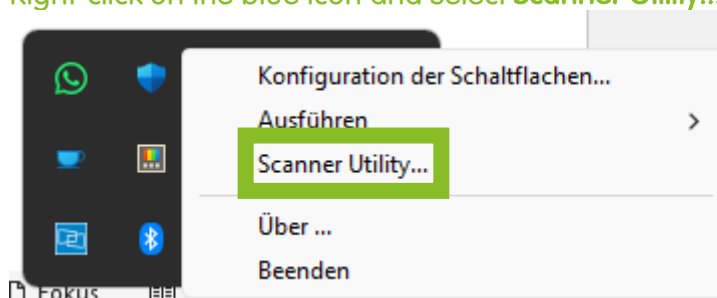

3.

Es geht ein Fenster mit den **Scanner Utility (Plustek OpticPro A320L)** auf. Klicken Sie in dem Fenster auf die Registerkarte **Standby Mode**.


A window called **Scanner Utility (Plustek OpticPro A320L)** will open. In that window, click on the **Standby Mode** tab.



4.

Im Register **Standby Mode** klicken Sie bitte die Option **Ausschalten Standby Mode** an und übernehmen Ihre Auswahl mit dem Button **OK**.

In the **Standby Mode** tab, please select the option **Disable Standby Mode** and confirm your selection by clicking **OK**.

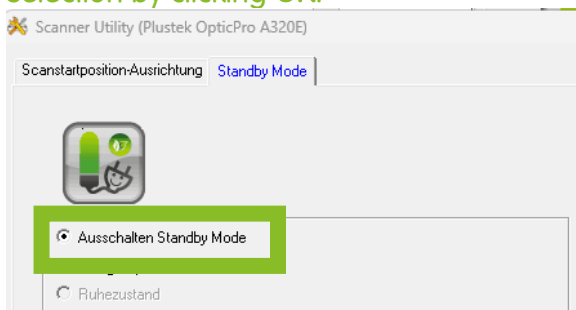

5.

Die Hinweismeldung bezüglich Stromverbrauch bestätigen Sie bitte mit **OK**. **Fertig, der Energiesparmodus ist damit deaktiviert!**

Please confirm the power consumption warning message by clicking **OK**.

Done – the power-saving mode is now deactivated!

